




ProCell 834

**Cell-on-Cell luchtbanen, matrasvervangend.
Zorgeloze preventie bij decubitus categorie 3/4.**

SPECIFICATIES

- + Decubitus categorie 3/4
- + Constante lage druk of wisseldruktherapie
- + 85/90/120 cm breed x 200/210/220 cm lang
- + 20 cm hoog
- + Max. gebruikersgewicht 200 kg
- + Nylon PU
- + Matrasvervangend door Cell-on-Cell systeem
- + Mogelijk om van 220 /210 lengte 200 te maken
- + Praktische transportfunctie, 8h autonomie
- + Binnenwerk tot 60°C wasbaar, hoes tot 95°C
- + CPR-ventiel 18 sec.

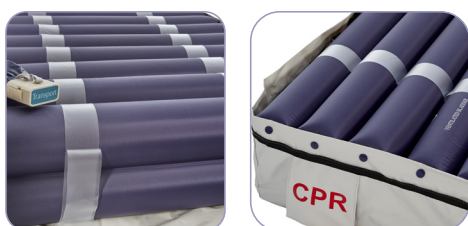

EIGENSCHAPPEN

Dit matrasvervangend Air-flow system bestaat uit Cell-on-Cell luchtbanen; 1 baan ligt op de onderzijde en de andere erbovenop. Hierdoor is het matrasvervangend. Om zwevende hielen te creëren, is het bij dit systeem mogelijk om specifieke zones volledig drukvrij te maken.

Uniek aan de ProCell 834 is de mogelijkheid om van 210/220 lengte 200 te maken door de voeten-Cell leeg te laten lopen en los te koppelen. Aan de hoeken zitten elastische banden om het matras aan het bedframe te bevestigen.

DE POMPKEUZE

Afhankelijk van de toepassing kan op de ProCell 512 gekozen worden voor:

- Q2K-02: met een manuele drukinstelling, alternerende cyclus (12 min.) of statische werking en een audiovisueel lagedruk alarm
- Q2K-03-digitale pomp: met comfort instelling, aanpasbare cyclustijd (10-15-20-25 min.), verzorgingsstand (Autofirm)
- S21-digitale pomp: met alternerende, statische of pulserende werking, een stroomuitval alarm en geheugenfunctie

DE Q2K-03-DIGITALE POMP

Deze digitale pomp werkt alleen wanneer de Cellen dienen te wisselen, of om de interne druk op peil te houden. Hierdoor is deze pomp veel stiller en verbruikt minder stroom. Als optie kan gekozen worden voor de Autolock waarbij de drukknoppen vergrendeld worden en instellingen niet ongewild veranderd kunnen worden. De zorgverlener ondervindt tijdwinst d.m.v. een shortcut om de verpleegstand (Autofirm) sneller te activeren.